



D-Lux Pen



波長域グラフ

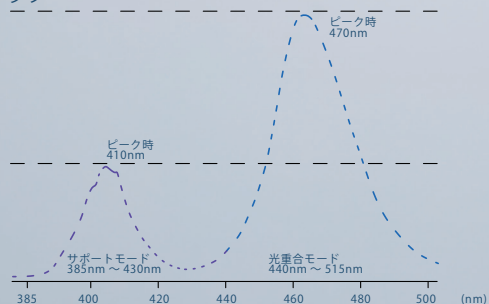

Ramp Mode (ランプモード)

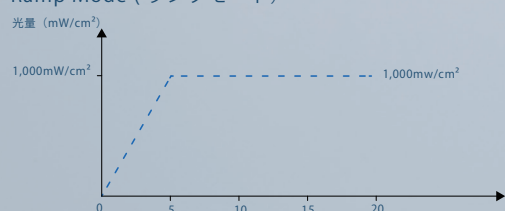

Pulse Mode (パルスモード)

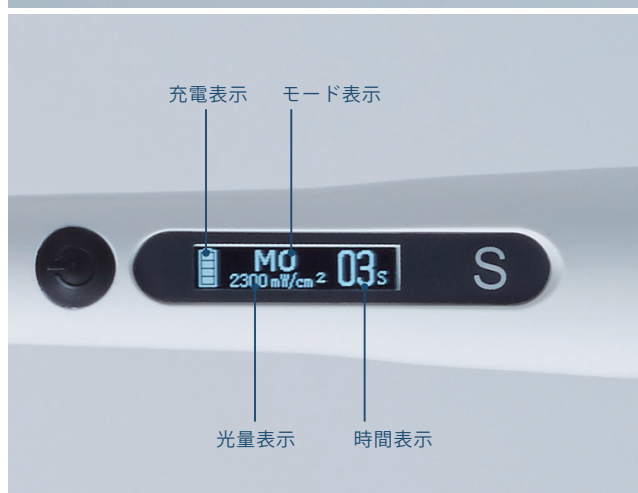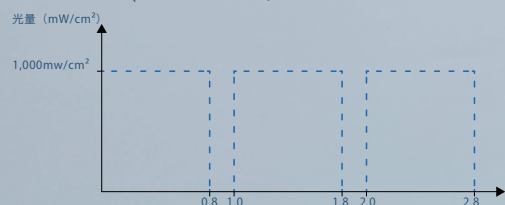

D-Lux Pen

ディラックス ペン

多彩なモードも簡単設定
良質で高い信頼性とデザイン

DENTRADE
DENTAL SUPPLY&TRADE



光量と波長域

光重合：440nm～515nm
2,300mW/cm², 1,500mW/cm², 1,000mW/cm²

サポートモード：385nm～430nm
600mW/cm²(サポートモード)
う蝕やクラックの視覚的な検知サポートが可能です。




360度回転

LED ヘッド部は 360° 回転可能でさまざまな部位に簡単に照射できます。




軽量で清潔

約 100g の軽量、また優れたデザイン性により、使い勝手が良く、照射性に優れた製品です。専用スリーブで清潔な診療が可能です。

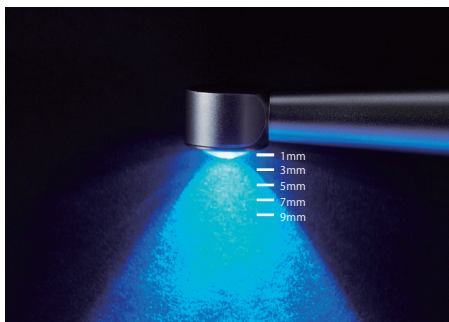

高い光直進性

照射用レンズの最適化により、光の集光性・直進性をはかり、広範囲かつ、より深部への照射が可能になりました。

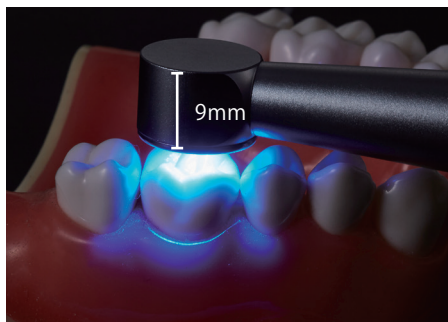

優れた硬化性

φ 11 mm の照射部に 4 つの LED を組み込む事で均一な光分布を実現しました。

ヘッド部の厚みは約 9mm と薄く臼歯部の照射も容易です。



安心な充電容量

フル充電には約 4 時間必要です。満タン時 2300mW/cm²、3 秒で約 1,000 回回の照射が可能です。

電池容量：3.7V 1600mAh
約 300 回の充電可能。

※バッテリーの交換も可能です。(有料)

また本機器はオートスリーブ設定が可能であり、1分、5分、10分、15分での選択が可能です。

関連商品・部品



LED ヘッド部
19,800 円



充電ベース
8,250 円



アダプター
4,400 円



ライトプロテクター
3,850 円



スリーブ (100 枚)
1,100 円

価格は、2020年3月のメーカー希望小売価格で消費税は含まれています。仕様および外観の一部また価格を予告なしに変更することございます。

D-Lux Pen ディラックス ペン

販売名：ディラックスペン (D-Lux Pen)
一般的名称：歯科重合用光照射器 (汎用歯科用照明器)

医療機器製造販売届書品目番号：27B2X00064000022
寸法：約 24 × 21 × 230 (mm) 重量：109g

ACアダプター電源：100-240V 出力：DC5V/1A

波長域・光量 (重合用)：440-515nm, 三種 2,300mW/cm², 1,500mW/cm², 1,000, mW/cm² 以上

波長域・光量 (サポート用)：385-430nm, 600mW/cm²

機器の分類：一般医療機器 / 特定保守管理医療機器

メーカー希望価格：43,780 円 (税込)



www.dentrade.co.jp

有限会社デントレード

〒567-0041

大阪府茨木市下穂積4丁目13-107

TEL: 0120(7)86086

FAX: 0120(1)86086

EMAIL: info@dentrade.co.jp